


Procedura di raccolta del cordone ombelicale

Per il personale medico



1. Selezionare una parte del cordone ombelicale che presenti una struttura regolare e il minor numero possibile di nodi, da una zona diversa da quella utilizzata per raccolta del sangue cordonale e più vicino possibile alla placenta.

Liberare l'area selezionata dai detriti e dai liquidi in eccesso utilizzando una garza sterile e poi disinfettare con cura.

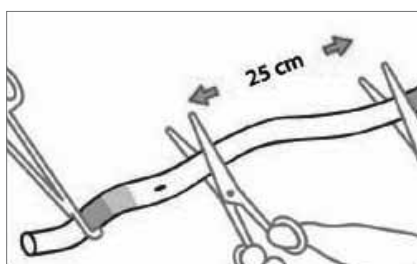


2. Utilizzando delle forbici sterili, tagliare un frammento lungo circa 25 cm o più dalla parte di cordone ombelicale pulito e disinfettato.


Attenzione! Selezionare e raccogliere solo un frammento del cordone ombelicale e assicurarsi che non rimangano attaccate parti di placenta.



3. Aprire la provetta di raccolta del cordone ombelicale da 50 ml, che contiene già il liquido di trasporto. Nel caso in cui il tubo non contenga alcun liquido, è indispensabile inserire 25 ml di soluzione fisiologica sterile (0,9% NaCl).

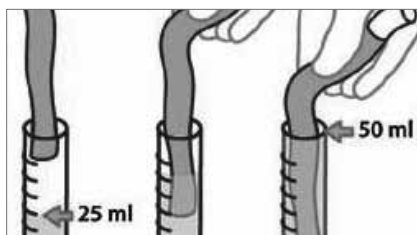

4. Trasferire in modo asettico il frammento di cordone ombelicale tagliato nella provetta. Assicurarsi che il volume del frammento raggiunga i 25 cm³ immergendolo totalmente nel liquido contenuto nella provetta, in modo che il liquido raggiunga l'orlo della provetta.

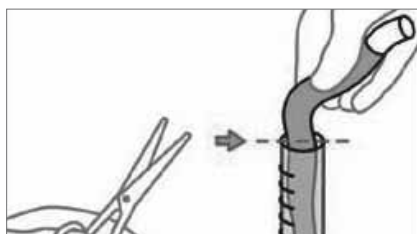

5. Tagliare e scartare la parte di cordone ombelicale che non è entrata nel tubo e chiudere ermeticamente la provetta per evitare perdite durante il trasporto.

Compilare le etichette sul verbale di raccolta del ombelicale tessuto cordonale e applicarle sulla provetta.

La provetta deve essere inserita nel contenitore a tenuta ermetica insieme alla sacca ematica e alle provette di sangue materno.

Per il confezionamento del kit, seguire i punti 13, 14 e 15 della procedura per la raccolta del sangue cordonale.